

## 600-1611 コダックデンタルフィルムディスペンサー 取扱説明書

### はじめに

本品はコダック社デンタルフィルム（シングル / ダブル）サイズ 2（標準タイプ：31mm×41mm）を 160 枚保管するよう設計されております。他社製フィルムの保管用途に使用される場合、フィルム 1 枚の厚み、ビニールバンドの有無を最初にご確認ください。



### 注意



本品を壁面に設置する前に、壁面に本品の重量（約 2.1kg・フィルム重量を含まず）に耐えうる強度があるか確認してください。強度等が不明な場合は専門業者にご相談ください。



設置後は必ず安全性を確認してください。また、その後も定期的に安全性を確認してください。



壁面の材質や強度によっては本品付属のネジでは不適合な場合がありますので、その場合は市販の適切なネジをご使用ください。




取り付け場所、取り付け方法の不備による事故等の責任は、当社では一切負いかねますのでご了承ください。

製品構成	①ディスペンサー本体	・・・1 台	④トップカバー	・・・1 枚
	②壁面取り付け用ブラケット	・・・1 枚	⑤シムシート	・・・1 枚
	③ブラケット用ネジ	・・・2 本		

### ご使用になる前に


#### 1. ディスペンサーを設置します。

- ① 設置後のディスペンサーの位置を踏まえ、ブラケットを壁に取り付ける場所を決めます。
- ② ネジ 2 本を使ってブラケットを壁に取り付けます。  
このとき、ブラケットの向きにご注意ください（右図参照）。
- ③ ディスペンサーの背面にある 2 箇所のつまみを  
ブラケットの 2 箇所の溝に差し込んで固定します。

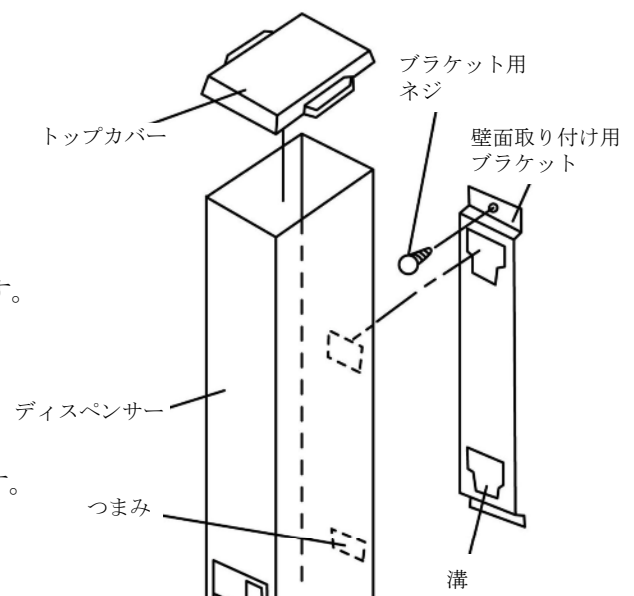


## 2. フィルムを入れます。

- ① ディスペンサーのトップカバーを開けます。
- ② デンタルフィルムの外箱を開け、ビニールラップ（内袋）を取り除きます。フィルムに巻かれたビニールバンドは外さないでください（入れる前に外すと、作業が困難になります）。
- ③ 上下のフィルムが張り付いていないことを確認してから、ディスペンサーに入れます。
- ④ ビニールバンドを切り、フィルムを静かに抑えながらビニールバンドをゆっくりと抜き取ります。
- ⑤ ディスペンサーのトップカバーを閉めます。

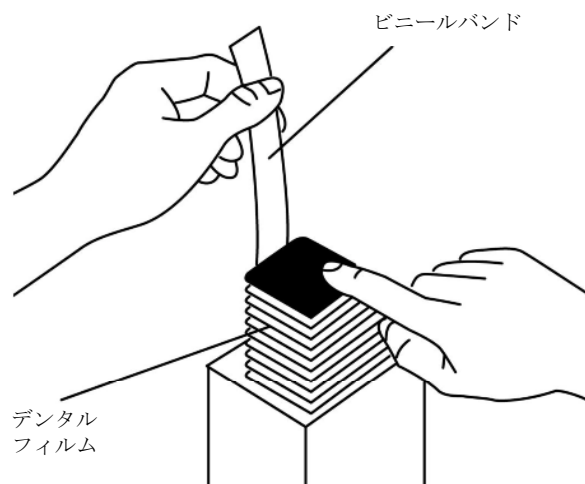

## 使用方法

- ① スライドをディスペンサーの中にゆっくり押し込んでから、またゆっくり手を離すとフィルムを取り出せます。
- ② フィルムが一度に2枚以上出てきたり、詰まったりする場合、付属のシムシートをスライド底部に貼り、高さを調整してください。

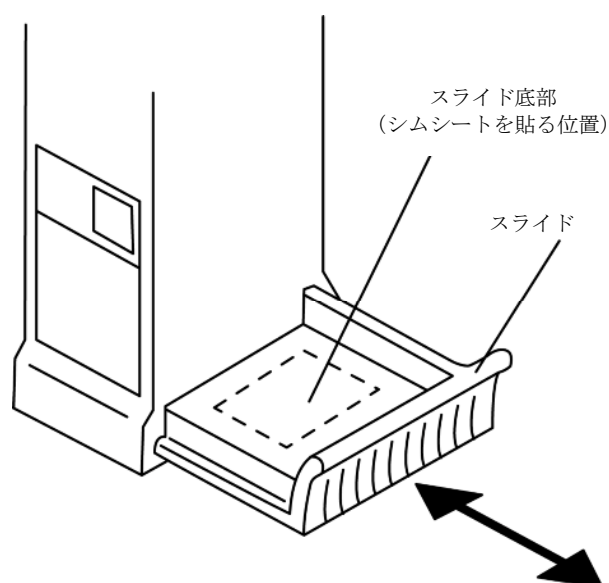

### 壁面に設置せずに使用する場合のご注意

- ・ぐらつきや傾きのある場所など、不安定な場所で使用しないこと。
- ・本品が転倒しても影響がないよう、周囲に破損しやすいものを置かないこと。
- ・スライドを押す際は必ず片手で本体を押さえた状態で、もう片方の手でスライドを押すこと。

製造業者 : イーストマン コダック カンパニー (アメリカ)  
輸入販売元 : フィード株式会社 / 〒220-6119 横浜市西区みなとみらい2-3-3クイーンズタワー  
カスタマ・サービスデスク 電話 0120-004-502